

SÄNGSKÅP PÅ HJUL FÖR **SJUKHUS** OCH VÅRD MILJÖER MED HÖGA KRAV PÅ **HYGIEN** OCH **PATIENTSÄKERHET**



ANHÖRIGSÄNGEN
SVERIGE AB

www.anhörigsängen.se



Innehållsförteckning

Varför Anhörigsängen Sesam?	4
Why choose Anhörigsängen Sesam?	5
Om Anhörigsängen Sesam	8
Användning	10
Sängens Delar	12
Hjulen	12
Madrassen	13
Mekanismen	14
Skåpstommen	15
Sängbotten	16
Produkter och Garanti	17
Anhörigsängen Sesam G1303	18
Anhörigsängen Sesam G1303, exklusive madrass	19
Tillval Läslampa LED	20
Frakt och Leverans	22
Beställning	24
Om Anhörigsängen Sverige AB	26
Miljöarbete	28
Kontakt	30
Teknisk Specification	31

Varför Anhörigsängen Sesam?

När patienten kan ha sina anhöriga hos sig hjälper det patienten att tillfriskna snabbare på flera plan. En skön och praktisk anhörigsäng möjliggör både för övernattning och längre besök under dagen, vilket i sin tur kan ge kortare vårdtider och gladare patienter.

Anhörigsängen Sesam är framtagen för att uppfylla Nya Karolinska Solna sjukhus och Stockholms läns landstings krav på en hygienisk, patientsäker och hållbar anhörigsäng till patient rum inom länets sjukhus.

- Produkten uppfyller de högt ställda kraven på material, hållbarhet, hygien och patientsäkerhet.
- Anhörigsängen Sesam är robust och lämpar sig för intensiv användning över lång tid och är därför ett hållbart alternativ inom alla sjukvårdens områden där en anhörig behöver en plats.
- Sängskåpet tar en väldigt liten yta i anspråk av rum eller övriga lokaler när sängen inte används. Förbättrat utnyttjande av lokalytor bör ge ekonomiska hållbarhetsfaktorer i planeringen av sjukhus och vårdinrättningar i framtiden där anhöriga räknas.
- Bädden är stadig, bekväm och lätt hanterlig för användaren. Enkel att rengöra och även sanera vid behov för personal.
- Alla delar uppfyller höga krav för hygien klass, Nivå 2. Alla delar tål rengöring med alkohol och alkaliska rengöringsmedel i vatten och madrassen kan duschas med hett vatten separat vid sanering.
- Flexibel och rörlig. Mycket enkel att flytta mellan rum, avdelningar och förvaring. Begränsningarna är få, vilket gör att Anhörigsäng Sesam lämpar sig för alla vårdande institutioner på alla nivåer där anhörig och patient önskar vara nära. Allt för att få en tryggare och därförmed förhoppningsvis snabbare tillfrisknande av patienten när krav på hygien och patientsäkerhet finns.
- Då forskning visar att närhet och umgänge mellan anhörig och patient resulterar i kortare vård i tid, kan Anhörigsängen Sesam betraktas som ett mycket hållbart inredningsval i framtida planeringar där anhöriga räknas med som en del i patientvård och rehabilitering.

Why choose Anhörigsängen Sesam?

A patient surrounded by loved ones recovers faster on several levels. A comfortable and practical bed for the patients relatives enables both overnight stays and longer visits during the day which shortens the time under treatment and makes patients happier.

Anhörigsängen Sesam is produced to fulfill the high demands on hygiene, patient safety and durability specified by Nya Karolinska Solna sjukhus and Stockholms läns landsting.

- Anhörigsängen Sesam is robust and suitable for intense usage over a long period of time which makes the product a sustainable choice within all healthcare areas.
- The space needed for the cabinet is very small when the bed is not in use. Improved utilization of space in hospitals and health facilities gives economical benefits and contributes to a more sustainable usage of room.
- The bed is stable, comfortable and simple to handle. It is also easy to clean and sanitize.
- All parts of the product fulfills high demands on hygiene, level 2, and can be cleaned using alcohol and alkaline cleaning. The mattress can be washed clean using hot water from the shower.
- Anhörigsängen Sesam is flexible and easy to move between rooms, departments and storage. This makes the product suitable for all health facilities on all levels where the patient wishes to have relatives nearby.
- Research shows that company and closeness between patient and relatives results in shorter time under treatment. Anhörigsängen Sesam can therefore also be considered a sustainable interior choice in future plannings of health facilities where close contact with the patient's relatives is considered part of the treatment and rehabilitation.






Säker

Anhörigsängen Sesam är noggrant utformad med komponenter av högsta kvalitet för att garantera lång och säker livslängd. Anhörigsängen Sesam uppfyller hygienkrav nivå 2 vilket innebär att hela produkten enkelt kan desinficeras med alkohol.



Flexibel

Vid förflyttning rullar Anhörigsängen Sesam tyst, mjukt och följsamt utan att lämna märken i golvet. Anhörigsängen Sesam tar liten plats i rummet och kan styras även i utfällt läge.

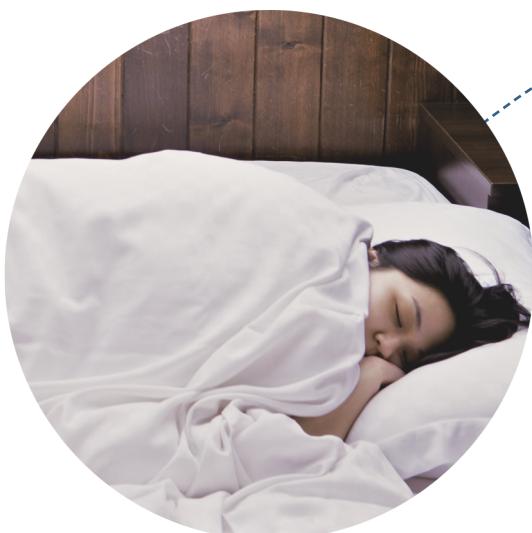

Bekväm

Anhörigsängen Sesam är skön att ligga i och utformad så att anhöriga ska kunna komma nära varandra. In- och utfällning av bädden sker genom logiska och ergonomiska rörelser vilket tillsammans med att produkten uppfyller hygienkrav 2 gör den väldigt enkel att rengöra.

Om Anhörigsängen Sesam

Anhörigsängen Sesam är ett sängskåp speciellt framtaget för sjukhus och vårdmiljöer. Samtliga komponenter är valda med omsorg för lång hållbarhet över tid och uppfyller hygienklass 2. Sängskåpet förflyttas mjukt och följsamt samtidigt som ut- och infällning sker genom intuitiva och ergonomiska rörelser. Bäddens sithöjd är 53 cm över golv med madrass vilket ger anhöriga möjlighet att vara väldigt nära varandra.



Användning

Sängskåpet har en öppen sida, vilken ställs mot vägg när skåpet inte används. Lösningen ger ett smidigt skåp med bra ventilation som tar liten plats i rummet. Skåpet rullas mjukt och styrvänligt även i utfällt läge och kan därför placeras var som helst i rummet så att exempelvis ögonkontakt kan hållas med anhörig. Den goda höjden över golvet på bädden gör att anhöriga kan komma väldigt nära varandra eftersom patientbädden oftast är högre än vad sängar normalt är. Allt för en bra kontakt mellan anhörig och patient!

Bädden fälls ut med hjälp av ett långt och greppvänligt stålhandtag. I nästa moment viks fotdelen ut med hjälp av att lyfta fotändens benbåge från horisontalläget så att nedre delen frigörs från stängt läge och viks ut. Benbågarna kommer i båda momenten automatiskt till sina slutpositioner när bädden fälls och viks ut. När bädden ska fallas in görs det omvänta. Fotändens rambygel används för att lyfta upp den nedre madrassdelen som viks in och ned mot den övre. Benbågen fungerar då som hävarm och stänger bädden med hjälp av excenterrörelsen. Därefter fälls mekanismen med madrass och sängkläder in i skåpet med hjälp av det breda handtaget som sitter väl placerat ytterst på bäddegens mittra dels undersida. Madrass och sängkläder hålls på plats genom hela momentet och rörelserna är både logiska och ergonomiska.





Sängens Delar | **Hjulen**

Skåpet har fyra stycken länkhjul med dubbla svängkranslager och förzinkade byglar med uppfyllt hygienklass för sjukhusmiljö. Hjulen har en ljusgrå fälg och grå hjulbana av termoplastiskt gummi med en hårdhet på 70 shore för att förhindra märken på golv. Samtliga hjul är kapslade med trådskydd och de hjul som är placerade mot skåpet sida är försedda med fotbroms. Skåpet står mycket stabilt på de länkhjul vi har valt att använda.

En ny typ av fot på benbågarna har framtagits som inte ger märken på golv när skåpet efterjusteras. Hjulen har egenskaper som kan klara ojämnheter i golv och övergångar och de rullar tyst, mjukt och fölsamt. Hjulen behöver inte vara låsta när skåpet fälls ut och används, det är endast vid momentet att fälla in skåpet som behovet att låsa det främre hjulparet skulle kunna uppstå.

Hjulen tål 80 grader varmt vatten och tål att spritas med 45% Isopropanol-lösning. Hjulen uppfyller hygien krav nivå 2 för vårdmiljö.



Sängens Delar | **Madrassen**

Madrassen är 12cm hög, helsvetsad och uppfyller hygienkrav nivå 2. Madrassens kärna är tillverkad i kallskum av typen CME (Combustion Modified Elastic Polyeter) med öppna celler för att säkerställa brandsäkerhet och komfort. Kallskumskärnan produceras av Rectiel på ett miljövänligt sätt helt utan halogenerade flamskyddsmedel (CFC-fri) och är både fysiskt och kemiskt återvinningsbar. Benämningen som "Flexible Foam", FR Foam EN-597 uppfyller högsta brandklass standard enligt test metod BS 5852 Crib 5.

Madrassöverdraget/PU-omslaget är 100% antibakteriellt i enlighet med JIS Z 2801 "ingen tillväxt" och enligt SN 195920. PU-Omslagets märke är Techmafex IPA FRC (T151) eller (T174) och blå i färgen. Tyget är permanent elastiskt mot veckbildning och tål 70% alkoholkoncentration men kan också rengöras med klorlösning (13 000 ppm). PU-omslaget är ånggenomsläplig i båda riktningarna och madrassen klassas därför inte som duschbar men tål att rengöras med 95 grader hett vatten.



Sängens Delar | **Mekanismen**

Mekanismen till Sesam anhörigsäng är utvecklad från Sedaflex 12M, vilken är utvecklad för att uppfylla testnorm EN-1725 och har testats enligt norm DD ENV 13759:2001 enligt Rapport TSSF35115, daterad 10 september 2010 för rörliga sammansatta delar av metallrör och platta metallkomponenter utan anmärkningar. Sedaflex 12M har också genomgått mer långtgående tester, bland annat FIRA Test Method For Contract Beds enligt TEST (Bs EN 1725:1998) och TEST (BS 7397:1991). Ett ytterligare säkerhetstest för sängar och madrasser har Sedaflex mekanismen prövats för enligt TEST BS EN 15373:2007. Rapporten för dessa tre tester är daterad 29 oktober 2010 med referens nr TSBDF35221 (Fira:s referensnummer).

Leverantören av mekanismens delar har 0% emissionsutsläpp till miljön från underarbete, lackering och utrustning. Täckfärgen är grå och hård där ytan har ett minimum av 80 micron på de lackerade ytorna av fällmekanismens rör- och stagdelar. Infästningen och formanpassningen av de rostfria plåtarna i sängbotten täcker större delen av mekanismens delar och håller hygienkrav nivå 2 även på mekanismens sinsemellan rörliga delar.



Sängens Delar | **Skåpstommen**

Skåpstommen är producerad av en 19mm tjock MDF stomme där alla delar är högtryckslaminerade med Formica högtryckslaminat F6463SHE NCS S 0500-N. Laminatet håller hög kvalitet och är Byggvarubedömt i Sverige, registrerat i BASTA-registret för utfasningen av farliga kemiska ämnen och har Svanens Miljömärkningslicens. Laminatet är även CE-märkt och stödjer kemikalielagstiftningen. Reach och Formicas produkter innehåller inga av de högriskämnen som är listade av den europeiska kemikalieinspektionen. För att göra skåpet mer stöttåligt har kanterna försetts med PVC-fria ABS-lister.

MDF-skivan som är fuktresistent, produceras av Medite Europe LTD och har varumärksnamnet Medite Industrial MR. Skivan har Nordisk ECO Svanen-märkt licens, förhåller sig till lågnivåvärden för formaldehyd enligt CARB phase 2 och är således en helt giftfri möbelkomponent med extremt låga emissionsvärdet. Medite Europe LTD följer krav och riktlinjer för att tillverka sina produkter genom återvinning av bland annat träflis för sin produktion istället för att fälla skog i enlighet med FSC Forest Chain of Custody systems klassificeringar. Medite Europe LTD är även certificerade av BM TRADA.



Sängens Delar | **Sängbotten**

Sängbotten består av rostfri polerad stålplåt, AISI 304, formgiven efter mekanismens rör och konstruktion. Botten är uppdelad i tre sektioner där varje sektion är formad efter rörramen vilket förstärker konstruktionen, ökar stabiliteten i de rörliga delarna samt utesluter att skruvande kraft uppstår på gångjärn och genomgående axlar för vikfunktionen.

Plåtarna hänger på rörramen och är fastskruvade med rostfri välvda torxskruv. Madrassen ligger stabilt förankrad i de nedsänkta plåtarna som är förstärkta med dubbelbockad kant mellan rörramens huvud och fotände. Madrassen rör sig därmed inte i bädden vilket alltid är uppskattat hos användaren.

Produkter och garanti

Då våra produkter håller högsta standard och är av bästa kvalitet medföljer en generös garanti för både stomme och madrass.

5 års garanti gäller för stomme, hjul, mekanism och sängbotten

2 års garanti gäller för madrassen



Anhörigsängen Sesam G1303

Artikelnummer: AS-RF-M12-VHPL-SLL

Sängskåp på hjul, **hygienkrav nivå 2**,
ingående delar:

1st Skåpstomme, S-VHPL

Högtryckslaminerad MDF

Kulör: Vit NCS s 0500-N

1st Sängbotten

Rostfria polerade stålplåtar, AISI 304, formade
efter ramen och förstärkta med dubbelbockade
profiler.

1st Madrass, RM12

Helsvetsad och antibakteriell.

1st Mekanism, Sedaflex12M

Pulverlackerad med grå metallic färg.

4st Länkhjul

Varav 2st med broms.



Anhörigsängen Sesam G1303, **exklusive madrass**

Artikelnummer: AS-RF-VHPL-SLL

Sängskåp på hjul, **hygienkrav nivå 2**,
ingående delar:

1st Skåpstomme, S-VHPL

Högtryckslaminerad MDF

Kulör: Vit NCS s 0500-N

1st Sängbotten

Rostfria polerade stålplåtar, AISI 304, formade
efter ramen och förstärkta med dubbelbockade
profiler.

1st Mekanism, Sedaflex12M

Pulverlackerad med grå metallic färg.

4st Länkhjul

Varav 2st med broms.



Tillval Läslampa LED

Artikelnummer: LLL3F

LED Lampa

Batteridrift AA



Frakt och Leverans

Tillsammans med Litepaq AB och Papyrus AB har vi skräddarsytt ett emballage och fraktpall i återvunnet wellpappmaterial som både kan återanvändas och återvinnas. Emballaget sparar mycket arbete, ger förbättrad arbetsmiljö och framförallt många träd i skogen.

Anhörigsängen Sesam levereras ihopmonterad och färdig att använda.



ANHÖRIGSÄNGEN
SVERIGE AB

Beställning

För att beställa skickar du ett mail med produktnamn och/eller artikelnummer tillsammans med antalet du önskar beställa.

Sedan fyller du i uppgifter för kontaktinformation och fakturauppgifter.

Vi skickar sedan en orderbekräftelse till din e-post.
Beställningen skickas till: order@anhorigsangen.se

Det går även att beställa via tel. 08-6090029 / 070-7986846

Exempel

Anhörigsängen Sesam G1303
Artikelnummer: AS-RF-M12-VHPL-SLL
Antal: 5st

Tillval Läslampa LED
Artikelnummer: LLL3F
Antal: 2st

Kontaktuppgifter:
Förnamn Efternamn
Företag/Organisation
Telefon: 070-1234567
Email: förnamn.efternamn@email.com

Faktureringsinformation:
Företag/Organisation
Org.nr: 1234567890
Referensperson: Förnamn Efternamn

Skickas till order@anhorigsangen.se

Om Anhörigsängen Sverige AB

Anhörigsängen AB är ett ungt företag men med stor erfarenhet av att konstruera skåpsängar. Vår konstruktör och produktionsansvarig, Per Halldin, har varit i branchen i över 30 år vilket medfört stor förståelse för vilka material och konstruktioner som lämpar sig för vilken typ av säng. Anhörigsängen Sesam är utvecklad med mycket högt ställda krav på hygien och material där samtliga komponenter valts genom ett systematiskt söknings-, testnings- och utvecklingsarbete. Detta för att uppnå en ändamålsenlig och prisvärd produkt av hög kvalitet och lång livslängd. Stor möda har också lagts på att uppnå en så bra komfort som möjligt inom ramen för det fysiska utrymmet i bäddens mekanism och skåp. Detta jobb har framförallt Per stått för, vilket gjort Anhörigsängen Sesam till det fantastiska sängskåp det är idag.



Miljöarbete

Vi på Anhörigsängen AB anser oss själva som ett ansvarstagande företag. Våra produkter är av högsta kvalitet med lång livslängd vilket är en förutsättning för ett grundligt miljöarbete. Våra underleverantörer har lång erfarenhet av att konstruera och tillverka i de olika material som Anhörigsängen Sesam består av. Samtliga har haft högt ställda krav på sig att uppfylla gällande miljökrav och andra riktade krav på arbetsmiljö, socialt ansvar och kvalitet som åberopats av slutanvändare och tillhandahållare, inte minst av Stockholms läns landsting och i skall- och möbelfaktakrav. Anhörigsängen Sesam uppfyller genomgående miljökrav i möbelfakta och specifikationer med hänsyn till både Svenska och EU-specifika normer. Certifikat på uppfyllda normer från underleverantörer finns sammanställda och kan levereras vid förfrågan och för samtliga komponenter.



Kontakt

Anhörigsängen Sverige AB

Epost: info@anhorigsangen.se
order@anhorigsangen.se

Telefon: 08-6090029 / 070-7986846

Adress: Skarpnäcks Gårdväg 10
Hus 11 port 1
128 31 Skarpnäck
Stockholms län

Org.nr: 559050-8742

Teknisk Specifikation

Anhörigsäng Sesam	
Benämning	Anhörigsäng mobilt i sängskåp
Fabrikör	Anhörigsängar AB Org.nr 559050-8742
Artikelnummer	S-MRF-RM-AS90-VHPL-RSLL
BSASKod	G.1303
Dnr	LS 2015-1077

Yttermått Anhörigsängen Sesam	
Bredd	91,6 cm
Djup	41,5 cm
Höjd	133 cm
Djup utfälld	207,5 cm
Bredd på mekanism utfälld	85,4 cm
Bredd invändigt sängskåp	86,8 cm
Vikt med madrass	77 kg

Bäddmått madrass	
Bredd x Längd	73 x 195 cm
Tjocklek madrass	12 cm
Bäddens sitthöjd inkl. madrass	53 cm
Belastning vikt	> 175 kg

Skåp	
Material	Högtryckslaminerad MDF, 19mm
Färg	Vit NCS 0500-N
Kantlist	preformerad ABS-list, PVC-fri
Hygienkrav nivå 2	✓

Madrass Recticel Flexible Foam CME Foam EN-597	
Madr Brandnorm	BS 5852
Madrass Min. Densitet	ISO 845, 30 kg/m ²
PU-Omslag	Helsvetsad Uppfyller Ökotex klass 1
PU-Beskrivning	Techmaflex IPA FRC T151/ T174
PU-Polyamid basväv	47%
Polyuretan FR yta	53%
PU- Desinfektion	70 % alkohol, Isopropanol > 45%
Antibakteriell	✓
Ångtrycksgenomsläplig	✓
Brandnorm	BS 6807 CRIB 5 och BS 7175 CRIB 5
Hygienkrav nivå 2	✓

Mekanism Sedaflex12M	
Uppfyller testnorm EN-1725	✓
Godkänd i testrapport TSSF35115	✓
Lackering	Pulverlackerad med grå metallic färg
Hygienkrav nivå 2	✓

Sängbotten	
Material	Rostfri stålplåt
Förstärkta med dubbelbockade profiler	✓
Hygienkrav nivå 2	✓

Hjul	
Kullager	Kraftiga svängkranslager
Hjulbana	Grå termoplast
Hårdhet	70 shore
Hygienkrav nivå 2	✓





ANHÖRIGSÄNGEN
SVERIGE AB